



Individualität

GoLife for Men und **GoLife for Women** sind in Form und Aufbau so einzigartig wie die Männer und Frauen, die sie tragen.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

GoLife passt sich Männern und Frauen individuell an.

GoLife for Men und GoLife for Women sind unsere ersten Pillow-Nasenmasken, die die unterschiedliche Anatomie des Gesichts von Männern und Frauen berücksichtigen. Das Ergebnis ist eine geschlechtsspezifische Passform für hervorragenden Tragekomfort.

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass beide Masken die gleiche Grundform verwenden, sich jedoch ansonsten deutlich unterscheiden. Auffällig sind die verschiedenen Farben von GoLife for Men und GoLife for Women.

Doch der tatsächliche Unterschied geht viel tiefer.

Bei genauerem Hinsehen lassen sich die Vorteile der individuellen Formen erkennen. GoLife for Men passt sich speziell den größeren Konturen männlicher Gesichtsstrukturen an, während Maskenrahmen und Kopfband der GoLife for Women wesentlich kleiner ausfallen und so speziell für weibliche Gesichtsformen geeignet sind.

Die GoLife-Plattform basiert auf einem einfachen Konzept und besteht aus nur wenigen Teilen. Die einzigartigen, weichen Gesichtskonturarme umschließen das Gesicht sanft und sorgen für Stabilität und sicheren Sitz, auch wenn sich der Patient bewegt. Die selbstanpassenden, optimal ausgerichteten Nasenpolster erlauben eine einfache, schnelle Einstellung. Das komfortable, leicht einzustellende Kopfband ist in zwei Größen erhältlich, jeweils eine für Männer und für Frauen.

Wenn Sie GoLife for Men und GoLife for Women miteinander vergleichen, erkennen Sie schnell die individuellen Passformen der GoLife-Masken.

Einfache Anpassung

Ziehen Sie die Kopfbänder über Ihren Kopf. Führen Sie die Polster in die Nase ein. Wählen Sie eine Polstergröße, die Ihre Nase angenehm ausfüllt, ohne dass Zwischenräume zwischen Polster und Nasenwand entstehen.



Verstellen Sie die Seitenbänder. Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an.



Stellen Sie das Scheitelband gegebenenfalls ebenso ein. Das Kopfband sollte ähnlich den Bügeln einer Brille über den Ohren verlaufen. Der hintere Riemen sollte über dem unteren Hinterkopf verlaufen.



Schließen Sie den Schlauch an das Gerät an. Schalten Sie die Luftzufuhr ein. Nehmen Sie die letzten Einstellungen im Liegen vor.



Um ein Polster zu befestigen, drücken Sie die beiden Seiten nach innen. Schieben Sie das Polster über den Schlauch, sodass es auf der unteren Maskenlippe liegt. Drücken Sie die runde Noppe am einen Ende des Polsters in die Rundung am Rahmen und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.




GoLife-Maskenrahmen und Kopfband sind unterschiedlich design, um sich individuell an die speziellen Anforderungen von Männern und Frauen anzupassen.

Weiche Gesichtskonturarme umschließen das Gesicht auf Jochbeinhöhe und sorgen für Stabilität.



Selbstanpassende, optimal gewinkelte Nasenpolster müssen nicht mehr eingestellt werden und bieten flexiblen, sicheren Halt.

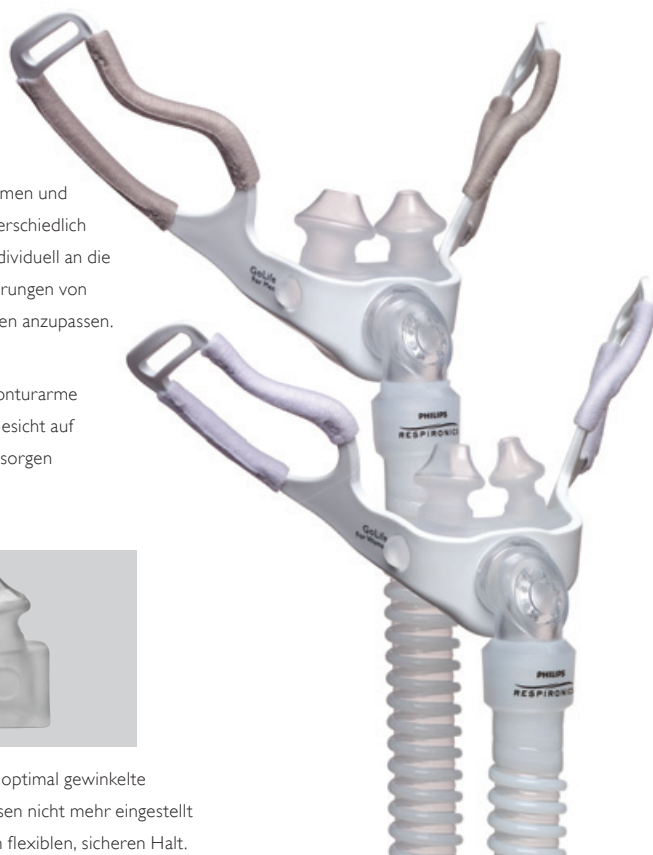

Breiter Luftstrom für geräuscharmes Ausatmen.

Langer, multidirektionaler 45,7-cm-Schlauch mit 360-Grad-Anschlussstück für perfekte Passform auch wenn sich der Patient bewegt.



GoLife for Women verwendet ein kleineres Kopfband, das tiefer am Hinterkopf sitzt, das ein Verrutschen verhindert und für besseren Sitz sorgt.

Bestellinformationen	
Maske GoLife for Women	Artikelnummer
FitPack: Maske mit Kopfband und Polstern in den Größen Petite, Small und Medium	1082580
FitPack: Nur Maske plus Polster in den Größen Petite, Small und Medium	1082579
Maske ohne Polster und Kopfband	1082578
Maske (nur Rahmen, kein Schlauch mit Anschlussstück)	1082583
Kopfband für GoLife for Women	1082581
Maske GoLife for Men	Artikelnummer
FitPack: Maske mit Kopfband und Polstern in den Größen Small, Medium und Large	1073331
FitPack: Nur Maske plus Polster in den Größen Small, Medium und Large	1073329
Maske ohne Polster und Kopfband	1073328
Maske (nur Rahmen, kein Schlauch mit Anschlussstück)	1078408
Kopfband für GoLife for Men	1073336
Ersatzteile und Zubehör	Artikelnummer
Ersatzpolster Petite	1073332
Ersatzpolster Small	1073333
Ersatzpolster Medium	1073334
Ersatzpolster Large	1073335
Befestigungsklemme für den Schlauch, 2 pro Packung	1073337
Schlauch mit Anschlussstück (45,7 cm) mit Ausatemöffnung	1078407

**Philips Healthcare ist ein Unternehmen
der Royal Philips Electronics**

So erreichen Sie uns

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien

+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer Osten, Afrika

+49 7031 463 2254

Lateinamerika

+55 11 2125 0744

Nordamerika

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Kundendienst
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics International
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

www.philips.com/respironics
www.philips.de/respironics

Respironics, FitPack und GoLife sind Marken von Respironics, Inc. und verbundener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter <http://www.philips.de/respironics>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Printer XX 00/00/00 MCI 4104322 PN 1092329